

B

BROCHURE

enovis™

PECA[®] COMPRESSIVE

VIS COMPRESSIVE BISEAUTÉE Ø4


VIS



CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Les vis PECA® Compressives sont indiquées pour la fixation d'ostéotomie & d'arthrodèse du pied.

Cette gamme de vis compressives à tête biseautée permet d'offrir un montage stable en maximisant l'ancrage cortical tout en préservant les tissus mous.

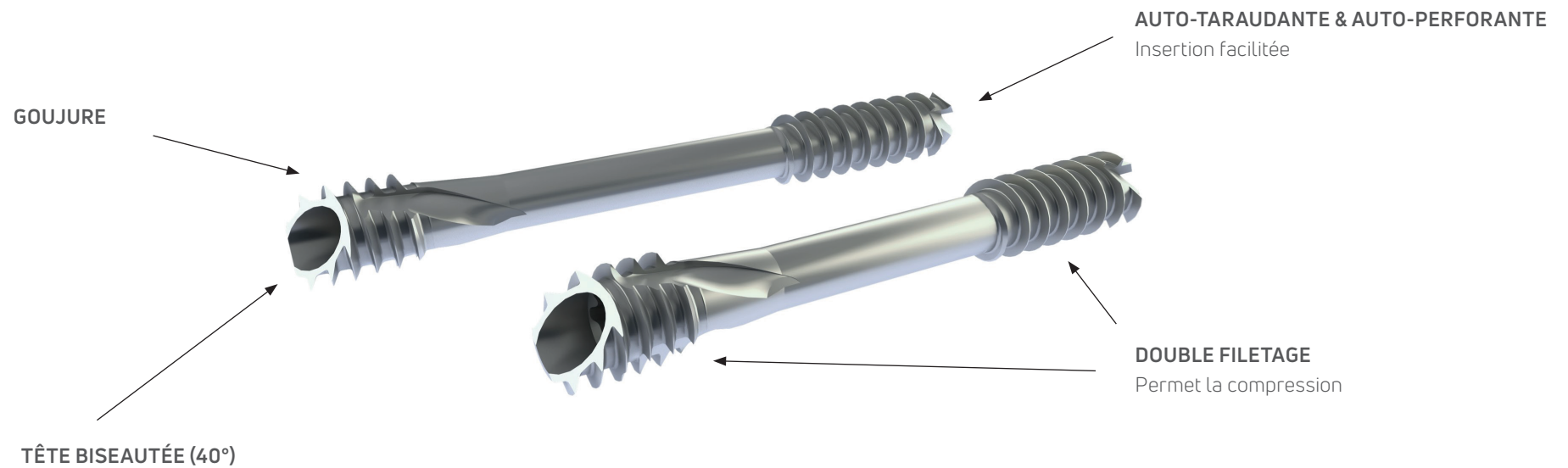

DESIGN BISEAUTÉ



TÊTE BISEAUTÉE

Ancrage cortical maximisé et préservation
des tissus mous

VS




TÊTE CLASSIQUE

Compromis entre enfouissement de la
tête et ancrage cortical

EMPREINTE EXACT-T®

Permet le positionnement exact de la tête biseautée. Le détrompeur permet le positionnement de l'embout du tournevis dans une position unique.

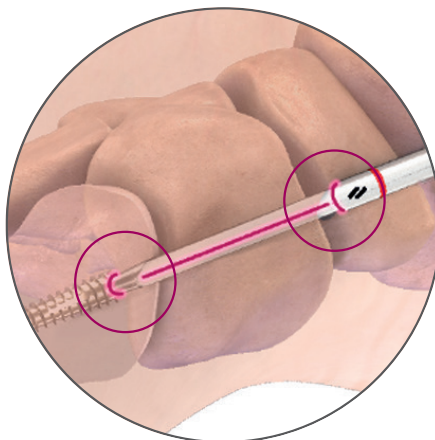

INDICATIONS MULTIPLES

Les vis PECA® Compressives peuvent être utilisées pour réaliser des arthrodèses dans les os du médio-pied, les métatarses et les phalanges du pied, seules ou en association avec une plaque Airlock®.

CHIRURGIE À CIEL OUVERT




MTP




TALO-NAVICULAIRE

CHIRURGIE PERCUTANÉE

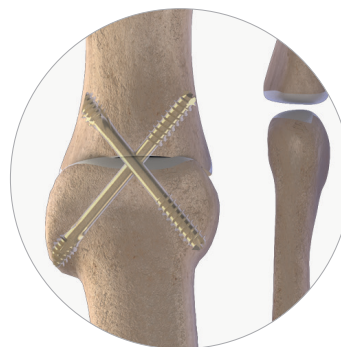

MTP

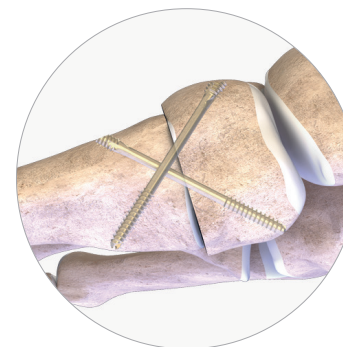

LAPIDUS



ARTHRODÈSE MTP - POST-OPÉATOIRE




ARTHRODÈSE MTP - POST-OPÉATOIRE


INSTRUMENTATION DÉDIÉE

Les vis PECA® Compressives Ø 4 mm peuvent être utilisées :

- Avec le kit PECA® avec ajout optionnel d'une fraise à chambrer
- Avec le kit AIRLOCK® avec ajout de l'instrumentation PECA-C®

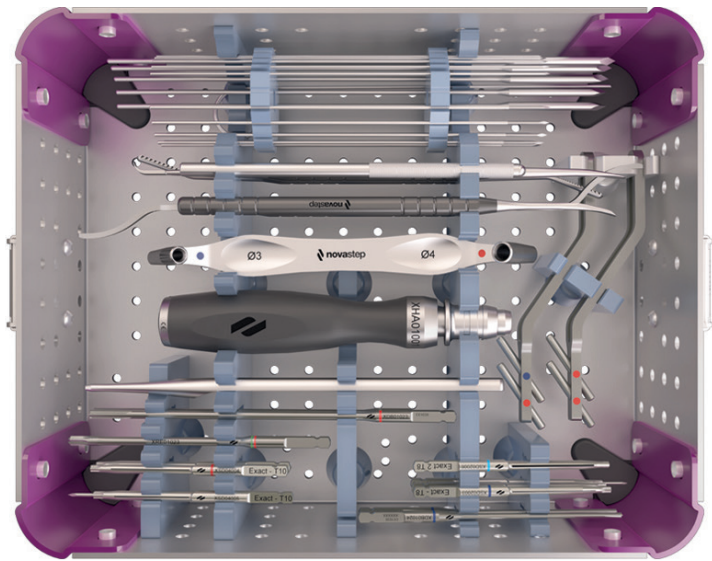

SET PECA®

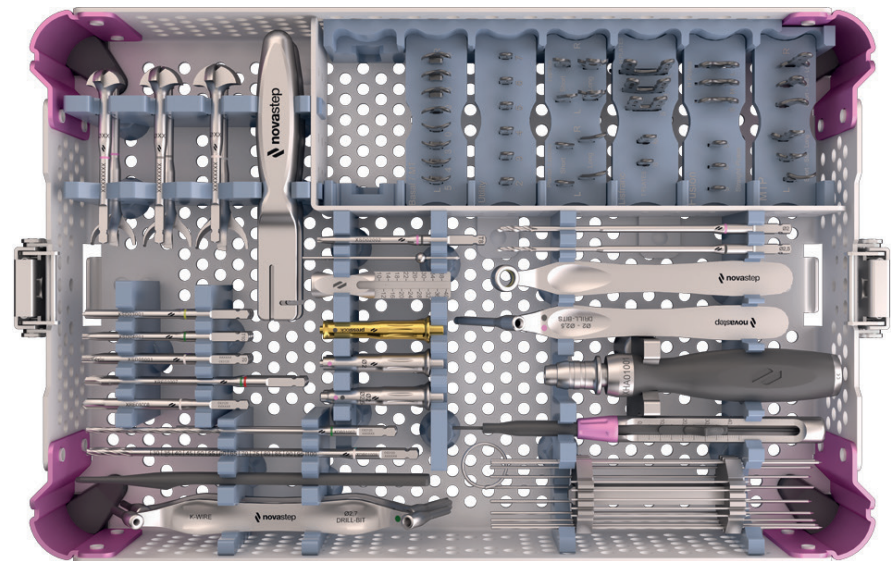

SET AIRLOCK®

RÉFÉRENCES

VIS PECA® COMPRESSIVE

LONGUEUR	RÉFÉRENCE
18mm	PS050118
20mm	PS050120
22mm	PS050122
24mm	PS050124
26mm	PS050126
28mm	PS050128
30mm	PS050130
32mm	PS050132
34mm	PS050134
36mm	PS050136
38mm	PS050138
40mm	PS050140
42mm	PS050142
44mm	PS050144
46mm	PS050146
48mm	PS050148
50mm	PS050150
55mm	PS050155
60mm	PS050160

INSTRUMENTS SPÉCIFIQUES PECA® COMPRESSIVE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
CKW02005 ⁽¹⁾	BROCHE Ø1.4 LG 150 CRCO
XDB01018	FORET AO Ø3.2
XSD04004	EMBOUT AO EXACT-T® 10
XGA01009	RÉGLET LG 150
XRE01007 ⁽²⁾	FRAISE À CHAMBRER Ø3.7 - NEXIS®/PECA®-C

⁽¹⁾ Broche vendue séparément

⁽²⁾ Option

enovis.

T +33 (0) 2 99 33 86 50 F + 33 (0) 9 70 29 18 95

Fabricant : Novastep® S.A.S
2 Allée Jacques Frimot | 35000 Rennes | France
contact-intfa@enovis.com
www.int.novastep.life

Copyright © 2024 Enovis Foot and Ankle

*Avant toute utilisation des dispositifs Novastep, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage de l'implant et des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.*

RÉFÉRENCE : PECA-C-L-ED2.1-06-25-FR